

ストッキング AG

以下の種類でご注文を承ります

- Juzoエキスパート
- Juzoエキスパートストロング
- Juzoエキスパートシルバー
- Juzoエキスパートストロングシルバー
- Juzoエキスパートコットン
- Juzoエキスパートストロングコットン



つま先



足先斜め加工のつま先なしタイプ 足先斜め先のつま先ありタイプ つま先なしタイプ つま先ありタイプ

- ・足背にリンパ浮腫がある場合
- ・足趾の付け根のラインに合わせて足先斜め加工

- ・伸縮性が高い
- ・履き心地がよい



五本指つま先ありタイプ

- ・足背部分につま先部分が縫い付けられているため、重ね履きにならない。
- ・小指（第5趾）なしのオプションもある。

ストッキングの上端／すべり止め／バンド



外側オーバーハイト／マックス

- ・上端の斜め加工
- ・外側に向けて最適な圧力分散

大腿前面オーバーハイト

- ・大腿前面外側リンパ浮腫の場合
ずり落ちを防ぐために生地を
高めに加工

シリコンなし

- ・必要に応じて粘着性ローション
などと組み合わせて使用可能

シリコンすべり止め 5 cm
シリコンすべり止め柄入り 5 cm

- ・シリコンのドットにより得られる
安定性および通気性



マイクロシリコンすべり止め 5 cm
マイクロシリコンすべり止め柄入り 5 cm

- ・より優れた通気性
- ・最低限のせんだん力



レースシリコンすべり止め 5 cm

- ・円状のシリコンストライプにより
さらなる滑り落ち防止




ベルト付き片脚ストッキング

- ・シリコンすべり止めとの組み合わせ
可能
- ・ベルトを左右のどちらにも付ける
ことが可能



ベルト付き片脚ストッキング(ペア)

- ・2ヶ所で開閉可能 (前面後面)
- ・必要に応じて前面のみ開閉可能な
ベルトに変更可能
- ・シリコンすべり止めとの組み合わせ
可能

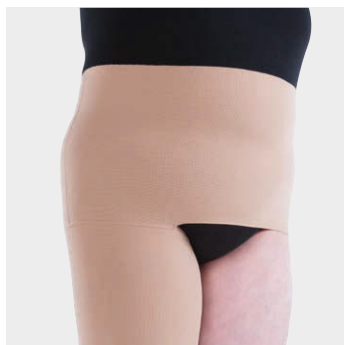

ボディパーツ付き片脚ストッキング

- ・腹部加圧タイプのもう一つの
ストッキングの留め方の選択肢

その他のオプション



90°（シワ抑え加工）

・踵の解剖学的な形に沿った加工のため足背のシワを抑えることができる。



cE点に膝屈曲加工

・30°または50°の角度の加工は可能
・解剖学的に膝屈曲がみられる場合



シリコンストッパー

・大腿部前面縦に、または、大腿部側面横に、付けることができる。



生地に縫い込んだシリコンすべり止め

・オーバーハイトとの併用のみで可
・生地内側3/4のみ縫い込みも可能
・その上に別のシリコンすべり止めを付けることもできる



cY点にトリコット裏地

・足背の皮膚が敏感な場合
・皮膚炎が見られる場合はシルバー入りの裏地もある。



cE点のトリコット裏地

・膝窩の皮膚が敏感な場合
・皮膚炎が見られる場合はシルバー入りの裏地もある。



Dr. Rotter緩衝パッド（縫い込み）

・内果外果後部により圧迫が必要な場合
・皮膚炎が見られる場合はシルバー入りのパッドもあります
・シリコン製パッドもあります



パッド用ポケット

・場所はカスタマイズ可能
・皮膚炎が見られる場合はシルバー入りの加工も可能



表側に縫い目

・肌に触れる縫い目は非常に平ら
・敏感肌に最適



cD点より減圧加工（ポロサ）

・cD点より減圧加工



ジッパー

・縫い目の線に加工（標準）
・それ以外の加工位置も可能



両側の膝サポート加工および／または膝蓋骨のサポートリング

・縫い込みの膝サポート



シリコン付き足底

・すべり止め加工