


パンティストッキング AT

以下の種類でご注文いただけます

- Juzoエキスパート
- Juzoエキスパートストロング
- Juzoエキスパートシルバー
- Juzoエキスパートストロングシルバー
- Juzoエキスパートコットン
- Juzoエキスパートストロングコットン

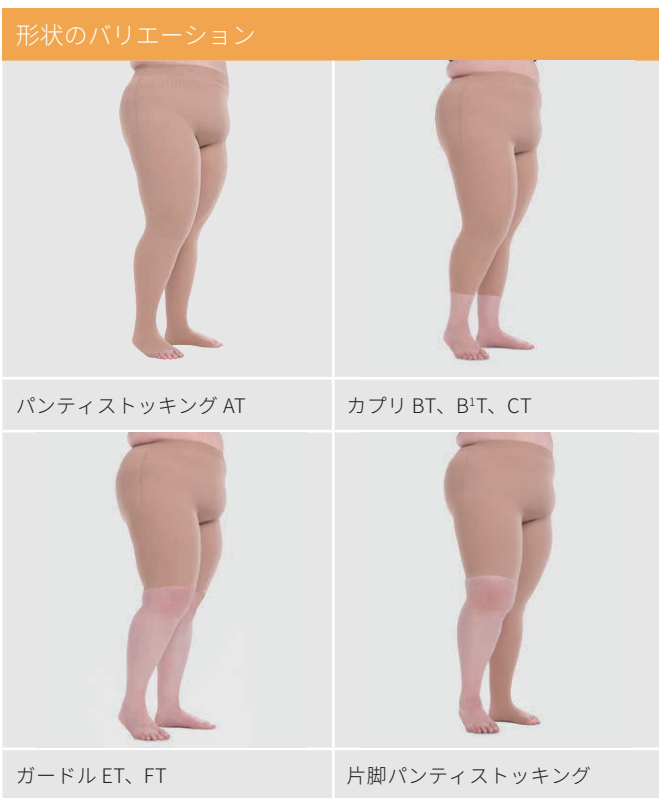

つま先




- 足先斜め加工のつま先なしタイプ
- 足先斜め加工のつま先ありタイプ
- つま先なしタイプ
- つま先ありタイプ



- 五本指つま先ありタイプ
- 足背部分につま先部分が縫い付けられているため、重ね履きにならない。
- 小指（第5趾）なしのオプションも選択可。

- 伸縮性が高く、履き心地のよいつま先部分

パンティストッキングの上端／バンド

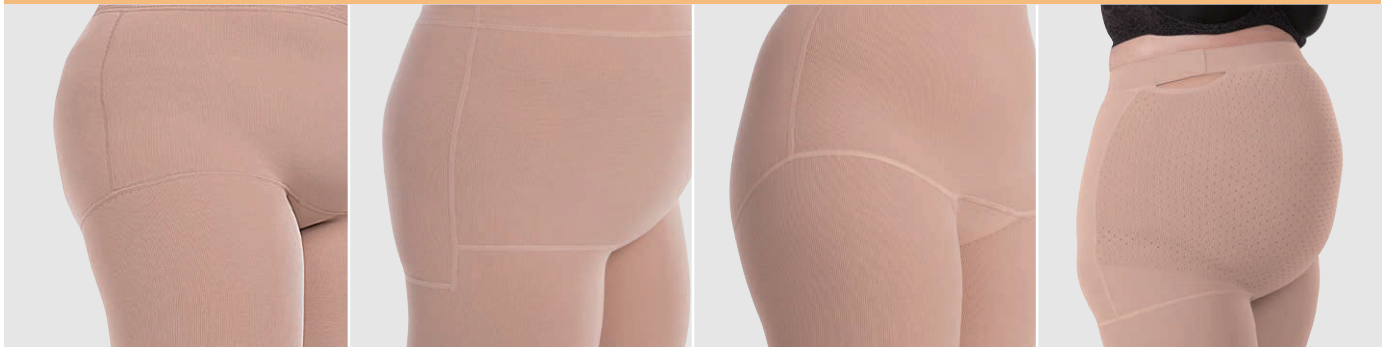

| | | | |
|--|---|--|---|
| 斜め加工 | ボックスタイプ | スリッパタイプ | マタニティフィット |
| <ul style="list-style-type: none"> ・標準型 ・腹部に浮腫が顕著な場合 ・平らなラインの鼠径部の場合 | <ul style="list-style-type: none"> ・体幹の周径が大きい場合 ・体幹側面に浮腫が顕著な場合 ・腰や臀部が大きい場合 | <ul style="list-style-type: none"> ・浮腫が軽度や体幹部が小さめな方の場合 ・急傾斜のラインの鼠径部の場合 ・腹部が平らな方の場合 ・腹囲最大120cmまでの場合 | <ul style="list-style-type: none"> ・体幹部後面は圧迫圧 (CCL) 1 ・体幹部前面は圧迫圧なし (腹部の形に合わせて伸縮します) ・ベルクロ式バンドは左右とも選択可 ・体幹部の丈は最短34cm以上 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| シリコンなし | 調整可能なウエストバンド | ウエストバンド | ベルクロ式ウエストバンド |
| <ul style="list-style-type: none"> ・柔らかい上端 | <ul style="list-style-type: none"> ・上端内側のボタン付きゴム製バンドでウエスト調整が可能 | <ul style="list-style-type: none"> ・平らで伸縮性のあるバンドの上端 ・上端は丸まらない | <ul style="list-style-type: none"> ・平らで伸縮性のある調整可能なベルクロ式ウエストバンド |



| | | | |
|---|---|---|---|
| シリコンすべり止め5cm | ジッパー付き体幹部 | フックファスナー付き体幹部 | ベルクロファスナー付き体幹部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・平らな上端 ・上端内側のシリコンドットにより安定性増加 | <ul style="list-style-type: none"> ・体幹部前面中央に加工 (標準) ・その他の位置も選択可 | <ul style="list-style-type: none"> ・体幹部前面中央に加工 (標準) ・その他の位置も選択可 | <ul style="list-style-type: none"> ・体幹部前面中央に加工 (標準) ・その他の位置も選択可 |

パンティストッキングATの標準の体幹部脚圧迫圧組み合わせ (その他の組み合わせも可能)

| | 圧迫圧 (CCL) | | | |
|-----|-----------|---|---|---|
| AT | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 脚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 体幹部 | 1 | 2 | 2 | 2 |

その他のオプション



ガゼット

- ・編みガゼット
- ・着圧のガゼットも選択可



小さいガゼット

- ・大腿周径が大きい方の場合
- ・着圧のガゼットも選択可



メッシュガゼット

- ・通気性が高いガゼット



小さいメッシュガゼット

- ・大腿周径が大きい方の場合
- ・通気性が高いガゼット



メンズ前開き

- ・男性用
- ・水平前開き



陰嚢加工

- ・陰部に最適にフィット
- ・前開きとの組み合わせも可能
- ・メッシュ生地も選択可



ストーマ用開口部加工

- ・計測時の印を基に個々に合わせて加工



股なし

- ・ガゼットなし
- ・脂肪組織が増加している場合は推奨しない



90° (シワ抑え加工)

- ・踵の解剖学的な形に沿った加工のため足背のシワを抑えることができる。



cE点に膝屈曲加工

- ・30°および50°の加工は選択可
- ・解剖学的に顕著な膝屈曲がみられる場合



シリコンストッパー

- ・大腿部前面縦に、または、大腿部側面横に、付けることができる。



生地に3/4縫い込んだシリコンすべり止め

- ・大腿部に加工
- ・安定性増加
- ・体幹部斜め加工（標準型）の場合のみ選択可

その他のオプション

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>cY点トリコット裏地</p> | <p>cE点トリコット裏地</p> | <p>Dr. Rotter緩衝パッド（縫い込み）</p> | <p>パッド用ポケット</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・足背の皮膚が敏感な場合 ・皮膚炎が見られる場合はシルバー入りの裏地も選択可 | <ul style="list-style-type: none"> ・膝窩の皮膚が敏感な場合 ・皮膚炎が見られる場合はシルバー入りの裏地も選択可 | <ul style="list-style-type: none"> ・内果外果後部により着迫が必要な場合 ・皮膚炎が見られる場合はシルバー入りのパッドも選択可 ・シリコン製パッドもある。 | <ul style="list-style-type: none"> ・場所はカスタマイズ可能 ・皮膚炎が見られる場合はシルバー入りのポケットも選択可 |
|  |  |  |  |
| <p>表側に縫い目</p> | <p>ジッパー</p> | <p>両側の膝サポート加工および／または膝蓋骨のサポートリング</p> | <p>シリコン付き足底</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・肌に触れる縫い目は非常に平ら ・敏感肌に最適 | <ul style="list-style-type: none"> ・縫い目の線路上に加工（標準） ・それ以外の加工位置も可能 | <ul style="list-style-type: none"> ・縫い込みの膝サポート | <ul style="list-style-type: none"> ・すべり止め加工 |